

SONICA® 2200

REV. 0 10-2010



Produktbezeichnungen:	Serie:
090.003.0002	2200 M
090.003.0003	2200 MH
090.003.0004	2200 ETH
090.003.0005	2200 EP

3 Liter

Allgemeine Merkmale

Die Reinigung mit Hilfe von Ultraschall ist ein modernes, sicheres und wirksames Verfahren, um in kürzester Zeit eine garantierte Tiefenreinigung zu erreichen.

Der Hauptvorteil liegt auf der Hand: zum einen perfekte Sauberkeit der Gegenstände durch die Beseitigung von Schmutz, Verkrustungen sowie festerer Schadstoffe, die manuell sehr schwierig zugänglich sind.

Soltec behält sich vor, kleinere technische Änderungen zur Verbesserung der Geräte ohne vorausgehende Ankündigung vorzunehmen

Technische Daten

Netzspannung	230/240 V~50/60Hz
Leistungsaufnahme	130 W
Leistungsaufnahme mit Heizung	305 W
Max. Spitzenleistung	360 W
Ultraschallfrequenz	40 khz ± 5%
Abfluss und Hahn	ETH-EP (Schlauch 10x8 mm)
Anzahl der Schwingsysteme	2
Fassungsvermögen Wanne	3
Gesamtgewicht ohne Flüssigkeit	3,5 Kg
Einbauklasse	Klasse II gemäß EN 61010
Zulässige Umgebungsbedingungen	Temperatur von 5° bis 40° C; rel. Luftfeuchtigkeit 80% bis 31°C, mit linearer Verringerung bis zu 50% bei 40°C.

Abmessungen der Wanne, innen

Länge	240 mm
Weite	140 mm
Tiefe	100 mm

Außenabmessungen

Länge	270 mm
Breite	170 mm
Höhe	260 mm

Verwendete Materialien

Verkleidung	AISI 304 Stahl
Wanne	AISI 304 Stahl

Angaben für den Einsatz als Medizinprodukt:

Bezeichnung: Ultraschall-Reinigungsgerät UMDNS-Nomenklatur (ECRI/DIMDI), 14-263


Zweckbestimmung: Ultraschall-Desinfektion und -Reinigung medizinischer und zahnmedizinischer Instrumente

Klassifizierung (Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX): Klasse I, aktives, nicht invasives, nicht implantierbares Medizinprodukt. Typ, Modell, Seriennummer, Baujahr: Angaben siehe Typenschild auf Geräterückseite

Angaben nach DIN EN 60601-1/VDE 0750 Teil 1/IEC 601-1:

Schutzklasse: 1

Schutztyp (B, BF, CF): entfällt, da kein Anwendungsteil vorhanden

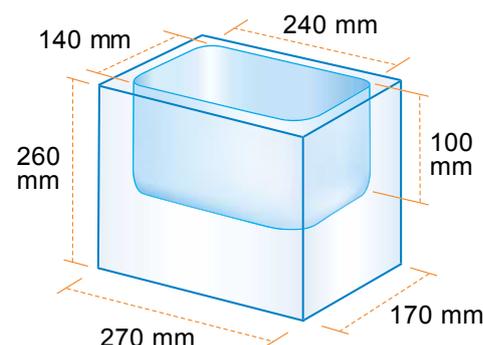


 2004/108/EC EMC Directive (EN 61326)
 2006/95/EC LV Directive (EN 61010-1)
 2007/47/EC Medical Device Directive

Verschiedene Versionen

M



Das Basismodell der Serie SONICA verfügt über eine Schaltuhr (Einstellung bis auf 15 Minuten), die zusätzlich eine manuell anzusteuermde Position zur Inbetriebnahme bietet.

Sweep System Technologie.

MH



Mit Schaltuhr bis 15 Minuten (plus manueller Position) und regulierbarer Heizung bis 60°C. **Sweep System** Technologie.

ETH



Ausführung mit elektronische Kontrolle der Reinigungszeit und der Temperatur. Die Serie ETH ist mit einem Mikroprozessor ausgestattet, der über eine wasserdichte Schalttafel die einzelnen Funktionen steuert.

Sweep System Technologie.

EP



Die technisch am weitesten entwickelte Version der Serie SONICA. Verfügt über: **Sweep System Generator**; hochmodernes Bedienungs-feld; Degas-Funktion; Temperatur-Regulierung bis 70°C; 9 verschiedene Reinigungsprogramme; Jet-Programm.